


Eerste gebruik van de NES miHealth

Zie instructies voor het aansluiten van de batterij hieronder. Gebruik alleen de batterij en de USB kabel die u van NES Health geleverd heeft gekregen.

Zorg ervoor dat het kabeltje bovenaan ligt.

Het wordt sterk aanbevolen dat u het device eerst volledig oplaadt alvorens het eerste gebruik. Als u uw NES miHealth gebruikt voordat de batterij volledig is opgeladen of de batterij helemaal verbruikt dan zal dit schade veroorzaken aan de batterij en daarmee de levensduur van de batterij aanzienlijk verminderen.

Let op: delicate onderdelen. Wees voorzichtig met het aansluiten en verwijderen van de batterij, en met het aansluiten en loskoppelen van de oplader.

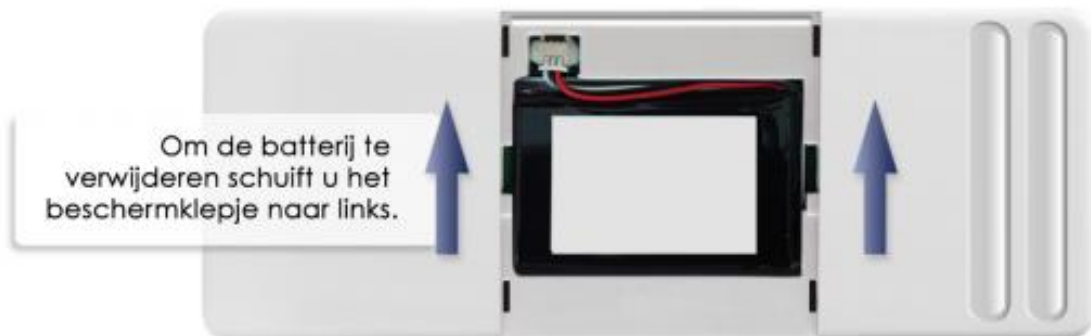

Garantie

Dit product heeft een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum op fabricagefouten. Deze garantie is niet van toepassing wanneer de schade te wijten is aan verkeerd gebruik of misbruik van het apparaat, wanneer er ongeautoriseerde wijzigingen of veranderingen zijn aangebracht aan het apparaat, of wanneer het apparaat wordt gebruikt in strijd met de instructies. De batterij wordt als verbruiksartikel beschouwd en heeft garantie voor 6 maanden vanaf de aankoopdatum. Voor de volledige garantievoorwaarden kunt u de Algemene Voorwaarden raadplegen op www.neshealth.com.

NES Health
East House, Braeside Business Park
Sterle Avenue West
Poole, BH15 2BX
www.neshealth.com
+44 1202 785888

 **PRODUCENT**

 Lees de instructies vóór gebruik van het apparaat	 Zie het navigatiegedeelte voor toegepaste onderdelen
 Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is	 De kartonnen verpakking kan recycled worden
 Batterijen NIET bij het huïsvul gooien	 Minimum & maximum temperatuur van toepassing
 Droog houden	 Minimum & maximum vochtigheidsgraad van toepassing



NES HEALTH
Energy For Life

Aan de Slag Met
NES mihealth





LEES DEZE INFORMATIE AUB VÓÓR U HET APPARAAT GEBRUIKT

Gebruik de NES miHealth NIET zonder professionele en gespecialiseerde opleiding bij iemand met één van de volgende aandoeningen:

- Een Pace Maker
- Allergie voor roestvrij staal
- Niet gediagnosticeerde aandoeningen en aandoeningen waarvan de oorzaak onbekend is
- Ernstige psychische aandoeningen
- Hartfibrillatie
- Hersenimplantaten of andere elektrische implantaten

Niet gebruiken:

- Tijdens zwangerschap
- In direct contact met open wonden
- Rond de ogen, de mond of direct over het hart
- Bij kinderen (onder de 5 jaar)
- Direct over metalen implantaten
- Wanneer aan de oplader

Raadpleeg uw arts of therapeut vóór gebruik van dit apparaat in het geval u last heeft van hartaandoening, epilepsie, ongediagnosticeerde pijn of wanneer u niet zeker weet of u gevoelig bent voor dit soort elektrische stimulatie.

Vanwege de elektrische aard van dit apparaat mag het niet gebruikt worden in volgende situaties:-

- Een natte omgeving en mag niet onder water gedompeld worden
- Wanneer het apparaat verbonden is met de computer of de oplader
- Wanneer er schade is aan het plastic omhulsel, het scherm of wanneer het apparaat op welke manier dan ook niet goed functioneert
- Indien de batterij lekkage vertoont of is beschadigt
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Alleen voor uitwendig gebruik.
- Maak het apparaat tussen behandeling en door schoon met anti-bacteriële doekjes.
- Gebruik alleen een door NES goedgekeurde batterij en oplader.
- Het apparaat mag op geen enkele manier gewijzigd worden zonder de schriftelijke toestemming van NES Health.

PROBLEEMOPLOSSINGEN

Gebruik de 'kalibreer elektrodes' functie wanneer u een externe elektrode aansluit of wanneer u problemen heeft met de elektrodes.

Wanneer uw miHealth scherm blijft hangen of wanneer u een zwart of wit scherm krijgt dan kunt u eventuele instructies op uw scherm volgen of contact opnemen met NES Health voor assistentie.

Het toestel aub. niet openen. Het bevat zeer gevoelige componenten en reparaties dienen ten alle tijden uitsluitend uitgevoerd te worden door de herkende technici van NES Health.

VERWIJDEREN VAN UW NES MIHEALTH & BATTERIJ(EN)

Batterijen moeten weggegooid worden in de daarvoor bestemde batterijeninzameling. Het miHealth apparaat moet afgevoerd worden naar een verzamelplaats van elektrische apparaten.

De NES miHealth is een handzaam apparaat op batterijen met roestvrijstaal elektroden aan de achterkant en de bovenkant van het apparaat. Kleine elektrische pulsen worden via deze elektroden en / of optionele koolstofpads aan het lichaam doorgegeven om het lichaam.


- Batterij- oplaadbaar Li-ion batterij 3.7v
- Capaciteit: 1100mAh
- Gewicht: 190gr
- CPU: 96MHz
- Geheugen: 256kb
- RAM: 16kb
- Elektrode voltages: bij contact met de huid 250V
- Elektrode voltages: zonder contact met de huid 5-100V
- Stroom in de huid: <1mA
- Gebruiksfrequentie: 15-1000Hz
- Luchtdruk: 900-1050mb
- Relatieve vochtigheid: 5-95%
- Gebruik in temperaturen van: 0-40°C

NES Health
East House, Braeside Business Park,
Sterte Avenue West, Poole, BH15 2BX, UK

Tel: +44 (0)1202 785888

www.neshealth.com

Navigatie

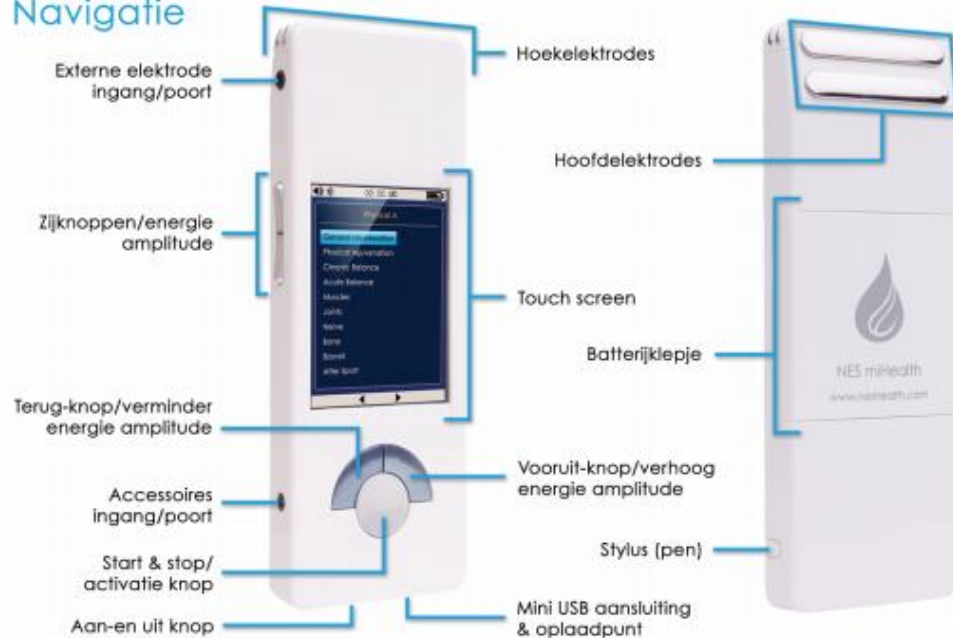

Gebruiksaanwijzingen

De NES miHealth is een elektronisch precisie apparaat en dient als zodanig gebruikt te worden. Om het apparaat in goede staat te behouden dient u het volgende in acht te nemen:

- Laat het apparaat niet vallen en leg geen zware dingen op het apparaat.
- Alleen lichte of matige druk uitvoeren op het apparaat wanneer in gebruik.
- Ben voorzichtig met de elektrodes, deze zijn gevormd van gepolijst roestvrij staal en zijn redelijk hard en sterk, maar let op dat u de elektrodes niet bekrast wanneer u het apparaat ergens neerlegt.
- Houdt het apparaat uit de buurt van vloeistoffen.
- De elektrodes zouden met anti-bacteriële doekjes moeten worden gereinigd na elke behandeling.
- Let op het batterijniveau en laadt het apparaat op wanneer het niveau laag is.
- Ben voorzichtig met het verbinden van elektrische kabels, niet forceren.
- Als het batterijsymbool niet langzaam beweegt tijdens het opladen verbindt de USB kabel dan met een andere stroomvoorziening en zorg ervoor dat de USB kabel niet langer dan 2 meter is.

Gebruikshandleiding

Als algemene richtlijn: gebruik miHealth alleen wanneer het veilig is. Zie de sectie "Waarschuwingen". Selecteer de gewenste en juiste applicaties binnen de touch screen menus. Plaats de elektrodes plat op de huid, op- of in de buurt van het betreffende gebied. Druk op de centrale start/stop knop en voer de intensiteit langzaam op, totdat u of de cliënt een licht tintelend gevoel waarneemt. Gebruik een langzame en zachte strijktechniek met de elektrodes over het huidgebied gedurende een paar minuten met lichte tot matige druk. Blijf controleren of het tintelend gevoel nog comfortabel is. Verminder de intensiteit wanneer het onaangenaam wordt.

Basis instructies

Aan- en uitschakelen

Gebruik de grijze knop aan de onderkant van het apparaat.

Druk de knop in en laat weer los. Het apparaat zal aanschakelen mits de batterij voldoende geladen is.

Om het apparaat uit te schakelen drukt u weer op de aan- en uit knop

De batterij opladen

Het niveau van de batterij wordt rechtsboven in het scherm met een batterij icoontje weergegeven. Bij normaal gebruik zou een volle batterij 7 uur moeten meegaan. Laad de batterij op voor gebruik wanneer de batterij bijna leeg is. Het duurt ongeveer 3 uur om een lege batterij volledig op te laden.

Om de batterij op te laden gebruikt u een USB kabel die u verbindt met een computer of met een oplader via de mini USB aansluiting aan de onderkant van het apparaat.

Scherminstellingen

- Scherf** - Wijzig de helderheid van het scherm en de automatische scherm rotatie
- Geluid** - Zet het geluid aan- en uit. Verhoog/verlaag volume
- Klok** - Wijzig tijd en datum
- mijn App** - Geeft de actuele informatie van uw apparaat

- miPurchases** - geeft een lijst met de standaard- en gekochte functies en cycli
- Ik** - toevoegen en wijzigen van uw gegevens
- Kalibreer Elektrodes** - kalibreer de interne en externe elektrodes
- Pincode** - instellen en wijzigen van de pincode
- Default Output** - Instellen van de standaard modus, elektrodes of off-body

Beginscherm

Er zijn 7 opties in het begin/startscherm:

- Fysiek
- Bescherming
- ER
- Energie
- Transformaties
- Mind
- Welzijn

Om een optie te selecteren raakt u de functie aan met uw vinger of de stylus. (rechtsonder aan de zijkant van het apparaat).



App scherm

- Selecteer een app door deze aan te raken



Functie overzichtscherm

- Blader door de functielijst door het scherm aan te raken of via de zijknoppen
- Zodra de functie is geselecteerd (opgelicht) duwt u op de ronde grijs/zilveren activatie knop om door te gaan



Functiescherm

- Begin de behandeling door op de grijze activatie knop te drukken
- Verander de intensiteit door op de zijknoppen of de blauwe knoppen aan de voorkant te drukken.
- Stop de behandeling door twee keer snel achter elkaar op de grijze activatieknop te drukken.